


X-BODY ADVANCE SP

Tutto il meglio della Tecnologia



Un sistema olistico, un'azione multi-attiva capace di agire sugli inestetismi di corpo, seno, glutei e viso. X-Body Advance SP combina le tecnologie più avanzate per rendere più completi e performanti i singoli trattamenti. La forza della Lipo-Sonicazione Transdermica, che agisce con decisione su adipe e cellulite, si fonde con l'energia della Radiofrequenza per il rassodamento tissutale e per il generale miglioramento della qualità della pelle, e si completa con il sistema Vacutonic per un'azione drenante, modellante e di ringiovanimento. X-Body Advance SP rappresenta l'unione perfetta delle metodiche più innovative e segna un nuovo punto di riferimento nella ricerca dell'eccellenza del risultato.

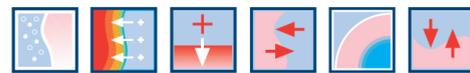

Art. 2451/3 X-Body Advance SP


RADIOFREQUENZA RFSYSTEM



Il Massaggio a Radiofrequenza RFSYSTEM

Piacevole, intenso ed efficace

Una gradevole energia RF si trasmette in modo controllato ai tessuti. L'utente sperimenta nell'immediato una piacevole sensazione di rilassamento mentre a livello tissutale si sviluppa un intenso effetto termico biologicamente attivo. L'azione che ne deriva è particolarmente performante nel trattamento degli inestetismi corporei adiposi e cellulitici, nel rassodamento cutaneo e nel generale miglioramento della qualità della pelle.

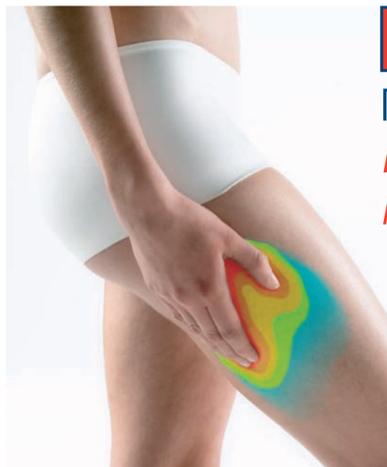

La Radiofrequenza RFSYSTEM: versatile e polivalente

Per cellulite, massa grassa e rassodamento tissutale

Questa tecnologia sviluppa un'azione multi-attiva che ottimizza l'attività tissutale e il nutrimento, favorisce il naturale processo di combustione dei grassi e migliora la difficile situazione delle "fredde" zone cellulitiche. L'energia della Radiofrequenza sviluppa anche una sensibile ritonificazione superficiale con "effetto stiramento" sulla lassità cutanea.

Radiofrequenza RFSYSTEM
Un'intensa e piacevole azione termica bioattiva

Ringiovanimento Viso & Antietà RFSYSTEM

Il Massaggio Energetico

La trasmissione controllata dell'energia RF sul viso, oltre ad essere particolarmente gradevole, produce un'attenuazione delle pieghe cutanee e delle rughe (effetto riempitivo), una distensione dei tratti (effetto lifting) ed una percepibile rielasticizzazione della pelle con aumento della densità, della tensione, del tono e della luminosità.



N. 6 Applicatori Automatici Sono-Photomassage

VACUTONIC SYSTEM SP



Le gioie di un dolce massaggio ritmato

Questo sistema combina i piacevoli effetti del massaggio a decompressione ritmata, la cui efficacia e gradevolezza sono ormai provate a livello internazionale, con le forme di energia Sono e Photo-Massage. Vacutonic System SP permette di modulare l'energia per ottimizzare le applicazioni sui tessuti e amplificare l'efficacia dei trattamenti snellenti, drenanti, modellanti, rassodanti e di ringiovanimento.



Il Massaggio Subdermico Vacutonic SP

L'innovazione sotto forma di Rulli, Sfere, Photomassage e Sonomassage

Precursore delle future tendenze nel campo del trattamento estetico, Vacutonic SP rivoluziona il concetto di Massaggio Subdermico. La sua forza risiede nella capacità di sfruttare l'energia positiva della luce (Photomassage a 638 e 904 nanometri) e degli Ultrasuoni (Sonomassage) e combinarla con l'utilizzo di Rulli e Sfere. Il trattamento prevede una prima fase automatica, in cui i tessuti vengono preparati tramite l'applicazione combinata della Luce e degli Ultrasuoni, e si sviluppa successivamente in un massaggio manuale con Rulli, Sfere e Photomassage. Il manipolo a rulli genera una depressione controllata aspirando la pelle e formando una piega cutanea che viene efficacemente massaggiata con un movimento di "arrotolamento e srotolamento". Nei trattamenti con il manipolo a sfere si utilizza la tecnica di massaggio a scorrimento Vacuspheres.



Speciali coppe volumizzatrici in plastica appositamente modellate in varie misure



Il Trattamento Vacutonic Seno & Glutei

"Ginnastica Espansiva" per una silhouette più definita

Il metodo Seno & Glutei sfrutta speciali coppe volumizzatrici appositamente modellate per lo specifico trattamento di queste parti. Il sistema esegue automaticamente il massaggio, in modo delicato, aspirando e decomprimendo ritmicamente la zona trattata sviluppando una gradevole "ginnastica espansiva". I risultati sono evidenti: un miglioramento della consistenza tissutale con visibile aumento di volume di seno e glutei.

ART. 2451/3 X-BODY ADVANCE SP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistemi operativi: 3 sistemi multattivi indipendenti per Lipo-Sonicazione, Radiofrequenza e Vacutonic System SP
LIPO-SONICAZIONE TRANSDERMICA
 Frequenza flusso ultrasuono: 40 KHz
 Fluenza flusso ultrasuono: max. 1,5 w./cm²
Programmi di Trattamento: sistema interamente protocollato con programmi definiti per ogni zona di lavoro
RADIOFREQUENZA RFSYSTEM
 Frequenza Rfsystem: 450 KHz
VACUTONIC SYSTEM SP
 Canali di uscita: Vacutonic n.2 (Corpo e Viso)
 SP n.6 (6 applicatori Sono-Photomassage)
Programmi e Percorsi di Trattamento pre-Impostati: 50 programmi
Vacutonic System: aspirazione max. 900 mm Hg
 SP: Ultrasuoni 2 MHz - Photomassage a 638 e 904 nanometri
Potenza assorbita: 1100 w.
Alimentazione: disponibili varie alimentazioni da 90 v. a 240 v - 50/60 Hz.
Dimensioni corpo macchina: cm. 50 x 36 x 21,8 h
Dimensioni totali con carrello: cm. 50 x 56,2 x 110 h



Il Metodo X-BODY ADVANCE SP e le tecnologie applicative:

- LIPO-SONICAZIONE TRANSDERMICA
- RADIOFREQUENZA RFSYSTEM
- VACUTONIC SYSTEM SP

LIPO-SONICAZIONE TRANSDERMICA




La forza delle micro bolle

Questa tecnologia si basa su un fenomeno fisico chiamato sonicazione. Quando un fluido viene sottoposto all'azione di un particolare ed intenso campo ultrasonoro genera al suo interno microscopiche bollicine. In determinate condizioni queste micro bolle tendono ad implodere producendo un'onda di energia. La Lipo-Sonicazione Transdermica non fa altro che riprodurre il fenomeno fisico all'interno del tessuto adiposo e sfruttare l'energia prodotta dalle micro bolle per mobilitare le cellule adipose e favorire così la liberazione dei grassi.

Un'energia innovativa contro adipe e cellulite



La Lipo-Sonicazione Transdermica, agisce senza compromessi sui depositi adiposi e cellulitici localizzati e consente di ottenere, progressivamente, un rimodellamento significativo e preciso della silhouette. Una metodica nuova e sicura che eleva gli standard di risultato e segna l'inizio di un nuovo percorso nei programmi di snellimento localizzato.

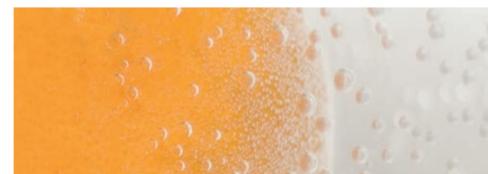

X-BODY ADVANCE SP

All the best of
Technology in a
Sole System

The Transdermic Lipo-Sonication
to treat efficaciously fat and cellulite,
the energy of the Radiofrequency
for tissue toning up and for
the general improvement of skin quality,
the system Vacutonic for a
draining, moulding and
rejuvenating action.



Art. 2451/3 X-Body Advance SP

Body



Gluteus



Breast



Anti-Age



ART.	MODEL	AVAILABLE MODELS			
		Transdermic Lipo-Sonication	Radiofrequency RfSystem	Vacutonic System	SP Function Ultrasounds and Photomassage
2451/3	X-BODY ADVANCE SP COMPLETE	•	•	•	•
2451/4	X-BODY ADVANCE SP LIPO-SONICATION	•		•	•
2451/5	X-BODY ADVANCE SP RFSYSTEM		•	•	•
2451/6	X-BODY ADVANCE COMPLETE	•	•	•	
2451/7	X-BODY ADVANCE LIPO-SONICATION	•		•	
2451/8	X-BODY ADVANCE RFSYSTEM		•	•	

X-BODY ADVANCE SP

Système multi-combiné pour traitements de Lipo-Sonication Transdermique, Radiofréquence, Vacutonic System, Ultrasons et Photomassage

X-BODY ADVANCE SP
TOUT LE MIEUX DE LA TECHNOLOGIE

Un système holistique, une action multi-active capable d'agir sur les inesthésismes du corps, poitrine, fesses et visage. X-Body Advance SP combine les technologies les plus avancées pour rendre plus complets et performants les traitements individuels. La force de la Lipo-Sonication Transdermique, agissant avec précision sur graisse et cellulite, se fonde avec l'énergie de la Radiofréquence pour le raffermissement des tissus et pour l'amélioration générale de la qualité de la peau, et se complète avec le système Vacutonic pour une action drainant, modelant et de rajeunissement. X-Body Advance SP représente l'union parfaite des méthodes les plus innovantes et marque un nouveau point de référence dans la recherche de l'excellence du résultat. La Méthode X-BODY ADVANCE SP et les technologies d'application:

• LIPO-SONICATION TRANSDERMIQUE • RADIOFRÉQUENCE RFSYSTEM • VACUTONIC SYSTEM SP

LIPO-SONICATION TRANSDERMIQUE

LA FORCE DES MICRO BULLES

Cette technologie se base sur un phénomène physique appelé sonication. Lorsqu'un fluide est assujéti à l'action d'un spécial et intense champ ultrasonore il engendre à son intérieur des bulles microscopiques. En certaines conditions ces micro bulles tendent à imploser en produisant une vague d'énergie. La Lipo-Sonication Transdermique ne fait que reproduire le phénomène physique à l'intérieur du tissu adipeux et qu'exploiter l'énergie produite par les micro bulles pour mobiliser les cellules adipeuses et ainsi favoriser la libération des graisses.

LIPO-SONICATION TRANSDERMIQUE
UNE ÉNERGIE INNOVANT CONTRE GRAISSE ET CELLULITE

La Lipo-Sonication Transdermique agit sans compromis sur des dépôts adipeux et de cellulite localisés et permet d'obtenir, progressivement, un remodelage significatif et précis de la silhouette. Une méthode nouvelle et sûre qui élève les standards de résultat et marque le début d'un nouveau parcours dans les programmes d'amaigrissement localisé.

LE MASSAGE A RADIOFRÉQUENCE RFSYSTEM
AGRÉABLE, INTENSE ET EFFICACE

Une agréable énergie RF se transmet de façon contrôlée aux tissus. L'utilisateur expérimente immédiatement une agréable sensation de relaxation et de fraîcheur épidermique tandis qu'au niveau des tissus se développe un intense effet thermique biologiquement actif. L'action qui en découle est spécialement performante dans le traitement des inesthésismes du corps adipeux et de cellulite, dans le raffermissement cutané et dans l'amélioration générale de la qualité de la peau.

LA RADIOFRÉQUENCE RFSYSTEM: VERSATILE ET POLYVALENTE
POUR CELLULITE, MASSE GRASSE ET RAFFERMISSEMENT DES TISSUS

Cette technologie développe une action multi-active qui optimise l'activité des tissus et la nourriture, favorise le processus naturel de combustion des graisses et améliore la difficile situation des "froides" zones cellulitiques. L'énergie de la Radiofréquence développe aussi une sensible retonification avec "effet étirement" sur le laxisme cutané.

RAJEUNISSEMENT VISAGE & ANTI-ÂGE RFSYSTEM
LES AGRÉABLES EFFETS DU MASSAGE ÉNERGÉTIQUE

La transmission contrôlée de l'énergie RF sur le visage, outre à être particulièrement agréable, produit une atténuation des plis cutanés et des rides (effet remplissant), une distension des traits (effet déridage) et une perceptible ré-élasticité de la peau avec augmentation de la densité, de la tension, du ton et de la luminosité.

VACUTONIC SYSTEM SP
LES JOIES D'UN DOUX MASSAGE RYTHMÉ

Ce système combine les agréables effets du massage à décompression rythmée, dont l'efficacité et plaisir sont désormais prouvés à niveau international, avec les formes d'énergie Sono et Photomassage. Vacutonic System SP permet de moduler l'énergie pour optimiser les applications sur les tissus et amplifier l'efficacité des traitements amincissant, drainant, modelant, raffermissant et de rajeunissement.

LE MASSAGE SOUS-DERMIQUE VACUTONIC SP
L'INNOVATION SOUS LA FORME DE ROULEAUX, SPHÈRES, PHOTOMASSAGE ET SONOMASSAGE

Précurseur des futures tendances dans le champ du traitement esthétique, Vacutonic SP révolutionne le concept de Massage Sous-dermique. Sa force réside dans la capacité d'exploiter l'énergie positive de la lumière (Photomassage à 638 et 904 nanomètres) et des Ultrasons (Sonomassage) et de la combiner avec l'usage de Rouleaux et Sphères. Le traitement prévoit une première phase automatique, dans laquelle les tissus sont préparés par l'application combinée de la Lumière et des Ultrasons, et se développe ensuite dans un massage manuel avec des Rouleaux, des Sphères et Photomassage. La poignée à rouleaux engendre une dépression contrôlée en aspirant la peau et formant un pli cutané qui est efficacement massé par un mouvement d'"enroulement et déroulement". Dans les traitements avec la poignée à sphères on utilise la technique de massage à glissement Vacuspheres.

LE TRAITEMENT VACUTONIC POITRINE & FESSES
"GYMNASTIQUE EXPANSIVE" POUR UNE SILHOUETTE PLUS DÉFINIE

La méthode Poitrine & Fesses exploite de spéciales coupes volumisant modelées exprès pour le traitement spécifique de ces parties. Le système exécute automatiquement le massage, de façon délicate, en aspirant et décompressant rythmiquement la zone traitée développant une agréable "gymnastique expansive". Les résultats sont évidents : une amélioration de la consistance des tissus avec une visible augmentation de volume de poitrine et fesses.

LE TRAITEMENT VACUTONIC VISAGE
TISSUS PLUS FERMES ET JEUNES

Vacutonic Visage favorise l'élasticité, le maintien et la tonification des tissus et grâce à l'action positive de la lumière, produit un agréable effet anti-âge. Le traitement améliore aussi la microcirculation superficielle et développe une délicate action drainant hydro-régulatrice.

ART. 2451/3 X-BODY ADVANCE SP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes d'opération: 3 systèmes multi-actifs indépendants pour Lipo-Sonication, Radiofréquence et Vacutonic System SP

LIPO SONICATION TRANSDERMIQUE

Fréquence flux ultrasonore: 40 KHz.

Fluence flux ultrasonore: max. 1,5 W/cm²

Programmes de Traitement: système entièrement enregistré avec des programmes définis pour chaque zone de travail

RADIOFRÉQUENCE RFSYSTEM

Fréquence RfSystem: 450 KHz

VACUTONIC SYSTEM SP

Canaux de sortie: Vacutonic n.2 (Corps et Visage)

SP n.6 (6 applicateurs Sono-Photomassage)

Programmes et Parcours de Traitement pré-affichés: 50 programmes

Vacutonic System: aspiration max. 900 mm Hg

SP: Ultrasons 2 MHz - Photomassage à 638 et 904 nanomètres

Puissance absorbée: 1100 w.

Alimentation: disponibles différentes alimentations de 90 v. à 240 v - 50/60 Hz.

Dimensions corps machine: cm. 50 x 36 x 21,8 h

Dimensions totales avec chariot: cm. 50 x 56,2 x 110 h

Sistemi per estetica, benessere e cosmesi • Sauna e vasche idromassaggio

© Cerri All rights reserved



The Wellness Experience

Via De Vecchi 2 - 20090 Assago (Milano) - (Italy)

Tel.: (+39) 02.4692586 r.a. - (+39) 02.45076272 r.a. - Fax: (+39) 02.463986 - (+39) 02.45503762 - info@cerri.it - www.cerri.it

Sede Legale e Ufficio Rappresentanza: Via Panizza 9 - 20144 Milano - (Italy) - Tel./Fax: (+39) 02.58100058

AVANTGARDE est le Secteur de Recherche et de Développement de CERRI



Solarium • Poltrone e lettini • Vaporizzatori • Scaldacqua • Arredamenti e progetti

Innovation: In a sole system Lipo-Sonication,
Radiofrequency and Subdermic Massage Vacutonic

Innovation

En un seul système Lipo-Sonication

Radiofréquence et Massage Sous-dermique Vacutonic



Technology:

Technologie


X-BODY ADVANCE SP

AVANTGARDE is the Research & Development Department of:



Since 1958

X-BODY ADVANCE SP All the best of Technology

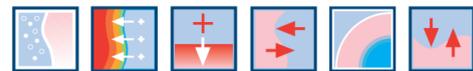

A holistic system, a multi-active action able to operate on non-aesthetic features of body, breast, gluteus and face. X-Body Advance SP matches the most advanced technologies to make more complete and performing single treatments. The power of Transdermic Lipo-Sonication, operating with decision on fat and cellulite, melts with the energy of Radiofrequency for the tissue stiffening and for the general improvement of skin quality, and is completed by the system Vacutonic for a draining, moulding and rejuvenating action. X-Body Advance SP represents the perfect union of most innovative methods and marks a new reference point in the search of result excellence.



Art. 2451/3 X-Body Advance SP

The Method X-BODY ADVANCE SP

and application technologies:

- TRANSDERMIC LIPO-SONICATION
- RADIOFREQUENCY RFSYSTEM
- VACUTONIC SYSTEM SP

TRANSDERMIC LIPO-SONICATION

The power of micro bubbles

This technology is based upon a physical phenomenon called sonication. When a fluid is subjected to the action of a special and strong ultrasound field, it generates inside itself some microscopic bubbles. In special conditions these bubbles tend to implode producing an energy wave. The Transdermic Lipo-Sonication only reproduces this physical phenomenon into fat tissue and exploits the energy produced by micro bubbles to mobilize the fat cells and therefore help fat release.

An innovative energy against fat and cellulite

The Transdermic Lipo-Sonication acts without compromises on fat and cellulite localized depots and allows reaching, progressively, a significant and definite remoulding of silhouette. A new and safe method enhancing result standards and marking the start of a new path in localized slimming programs.

RADIOFREQUENCY RFSYSTEM

Radiofrequency Massage RFsystem

Pleasant, intense and efficacious

A pleasant energy RF is transmitted to tissue in a controlled way. User immediately experiences a pleasant feeling of relax while at tissue level a strong thermal biologically active effect is developed. The action coming from it is specially performing in the treatment of non-aesthetic fat and cellulite features of the body, in skin stiffening and in the general improvement of skin quality.




Radiofrequency RFSystem
An intense and agreeable bioactive action

Radiofrequency RFsystem: Versatile and polyvalent
For cellulite, fat mass and tissue stiffening

This technology develops a multi-active action optimising tissue activity and feeding, helps the natural process of fat combustion and improves the difficult situation of the "cold" cellulite zones. The energy of Radiofrequency develops also a sensible surface re-toning up with "ironing effect" on skin relaxation.

Rejuvenating Face & Anti-age RFsystem
Pleasant effects of Energetic Massage

Controlled transmission of the energy RF on face, besides being especially pleasant, produces an attenuation of skin folds and wrinkles (filling effect), a distension of features (lifting effect) and a perceptible re-elasticising of skin with improvement of density, tension, tone and brightness.

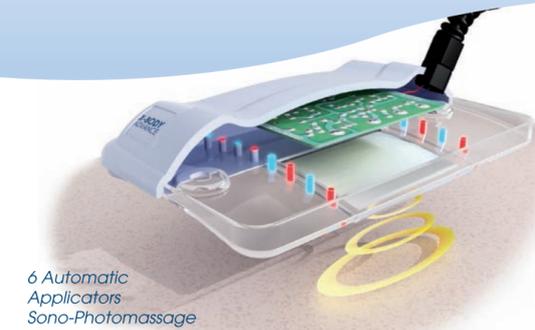

6 Automatic Applicators Sono-Photomassage

VACUTONIC SYSTEM SP

The pleasures of a sweet rhythmic massage

This system matches the pleasant effect of rhythmic decompression massage, whose efficacy and pleasure are already tested at international level, with energy forms of Sono and PhotoMassage. Vacutonic System SP allows modulating the energy to optimise applications on tissues and widen the efficacy of slimming, draining, moulding, toning and rejuvenating treatments.

The Sub-dermic Massage Vacutonic SP
The innovation shaped as Rolls, Spheres, Photomassage and Sonomassage

Forerunner of future trends in the field of aesthetic treatment, Vacutonic SP revolutionizes the concepts of Sub-dermic Massage. Its power is in the capacity to exploit the positive energy of light (Photomassage at 638 and 904 nanometres) and of Ultrasounds (Sonomassage) and to match it with the usage of Rolls and Spheres. This treatment foresees a first automatic step, where tissues are prepared by the matched application of Light and Ultrasounds, and then the manual massage is performed by Rolls, Spheres and Photomassage. The roll sheaf generates a controlled depression by sucking skin and forming a skin fold that is efficaciously massaged by a "rolling up and unrolling" handling. In treatments by the Sphere sheaf it is used a technique of sliding massage Vacuspheres.



Special volumising plastic cups shaped in different sizes

The Treatment Vacutonic Breast & Gluteus
"Expansive Gymnastics" for a more defined silhouette

The method Breast & Gluteus exploits special volume cups expressly moulded for the specific treatment of these parts. The system automatically performs the massage, in a delicate way, rhythmically sucking and decompressing the treated area by developing some pleasant "expansive gymnastics". The results are evident: an improvement of tissue consistency with a clear volume increase of breast and gluteus.

The Treatment Vacutonic Face
Firmer and younger tissues

Vacutonic Face helps elasticising, maintenance and toning up of tissues and thanks to the positive action of light produces a pleasant anti-age effect. The treatment improves surface microcirculation too and develops a soft draining hydro-regulating action.



X-Body Advance Handstylets:

1. Vacutonic Body
2. Vacutonic Face
3. Rf Face
4. Lipo-Sonication
5. Rf Body

ART. 2451/3 X-BODY ADVANCE SP

TECHNICAL FEATURES

Operation Systems: 3 Independent Multi-Active Systems For Lipo-Sonication, Radiofrequency And Vacutonic System Sp
TRANSDERMIC LIPO-SONICATION
Frequency of ultrasound flow: 40 KHz
Fluency of ultrasound flow: max. 1,5 w./cm²
Treatment Programs: system fully filled with definite programs for each working area
RADIOFREQUENCY RFSYSTEM
Frequency Rfsystem: 450 KHz
VACUTONIC SYSTEM SP
Exit channels: Vacutonic n.2 (Body and Face)
SP n.6 (6 applicators Sono-Photomassage)
Treatment pre-set Programs and Tracks: 50 programs
Vacutonic System: intake max. 900 mm Hg
SP: Ultrasounds 2 MHz - Photomassage at 638 and 904 nanometres
Absorbed power: 1.100 w.
Feeding: different loadings available 90 v. up to 240 v - 50/60 Hz.
Dimensions of machine body: cm. 50 x 36 x 21,8 h
Total dimensions with trolley: cm. 50 x 56,2 x 110 h



The Wellness Experience